


吸入指導チェック報告書

(調剤薬局⇒刀根山病院 FAX:06-6853-3127)

薬局名:
店名:
指導薬剤師名:

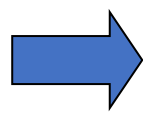

患者 ID:
患者名:
担当医師名:

【ブリーズヘラー】吸入指導チェック表

ID:

患者名:

用法用量:(1日1回 1回1吸入)

オンプレス・シーブリ・ウルティプロ

指導日

	／	／	／	／	／	
①薬の効果を説明						
②用法用量を説明						
(注意点)						
吸入手順	③ 薬の準備	吸入直前に1カプセル取り出す オンプレスはカプセルを押し出す 他は、押し出さずにアルミシートを剥がす				
	④ 薬のセット	カプセルをセットし、カチッと音がするまでしっかりマウスピースを閉める				
	⑤ 吸入準備	両側のボタンをカチッと音がするまで強く押す(何回も押さない) 押したらボタンからは手を離す				
	⑥ 息吐き	吸入口に息を吹きかけないようにして、苦しくない程度に息を吐く				
	⑦ 薬の吸入	速く深く 吸い込む (カプセルの回転音が聞こえる)				
	⑧ 息止め	苦しくない程度にできるだけ長く止める(5秒程度)				
	⑨ 息吐き	鼻からゆっくりと息を吐き出す				
	⑩ もう1度⑥～⑨を計2回以上繰り返し、マウスピースを開けてカプセル内に薬が残っていないことを確認する (残っている場合は再度⑥～⑨を繰り返す)					
	⑪ 薬の廃棄	シーブリ・ウルティプロは手で直接カプセルに触らない 触った場合は水で手を洗う				
	⑫ うがい	必ず必要ではない				
⑬ 保管・お手入れの説明	デバイスは30日を目安に新しいものに交換する					
		確認者名				

◎正しくできる

○できているが再確認必要

△できていない

補助資料

特記事項



各種ブリーズヘラー



練習用カプセル